



“BODY CONTROL FAMILIAL”

Что такое “Body Control Familial”?

Это напольные весы, предназначенные для взвешивания людей и характеризующие степень тучности (или худобы) всех членов семьи.

Для каждого человека весы “Body Control Familial” указывают:

- его вес,
- прибавку/потерю в весе со времени последнего взвешивания, результаты которого хранятся в памяти,
- индекс массы тела (BMI),
- категорию индекса массы тела (одну из четырех).

Для кого предназначены весы “Body Control Familial”?

Они предназначены для всех членов семьи:

- для детей и подростков в возрасте от 2 лет до 18 лет,
- для взрослых (в возрасте от 19 до 99* лет).

* Для взрослых старше 65 лет классификация индекса массы тела может оказаться неточной. В любом случае, взвешивание на весах не представляет никакой опасности для здоровья.

Что такое индекс массы тела (BMI)?

- для взрослых:

Это соотношение между весом и ростом человека, которое используется для оценки тучности человека. Вычисляется по формуле: $BMI = \text{вес (кг)} / [\text{рост (м)}]^2$

- для детей и подростков:

Тучность ребенка изменяется по мере его роста и полового созревания, в зависимости от пола. Поэтому оценка индекса массы тела ребенка зависит от возраста и пола. Вычисляется процентиль, и на этой основе определяется категория индекса массы тела.

Как пользоваться весами “Body Control Familial”?

Весы «Body Control Familial» очень просты в эксплуатации:

- введите в память весов свои персональные параметры (рост, возраст, пол),
- в зависимости от результата взвешивания, вычисляется индекс массы тела (BMI),
- индекс массы тела автоматически относится к одной из 4-х категорий:

- для взрослых:

> 30	от 25 до 29,9	от 18,5 до 24,9	< 18,5
ожирение	избыточный вес	нормальный вес	худоба

- pour les enfants et les adolescents :

> 95 P	от 85 P до 95 P	от 5 P до 85 P	< 5 P
избыточный вес	риск избыточного веса	нормальный вес	дефицит веса

Категория индекса массы тела указывается в строке результата, что позволяет получить результат оценки тучности сразу и в понятной форме:



Дети/подростки
Взрослые

дефицит веса
худоба

нормальный вес
нормальный вес

риск избыточного веса
избыточный вес

избыточный вес
ожирение



“BODY CONTROL FAMILIAL”

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку и надеемся, что Вы останетесь ею довольны. Советуем Вам внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Демонтировать весы не следует; неправильное обращение с ними может стать причиной травм.
- Эти электронные весы не предназначены для профессионального использования в медицинских учреждениях; они предназначены исключительно для частного употребления в домашней обстановке.
- После употребления весы рекомендуется протереть влажной салфеткой, но при этом необходимо проследить за тем, чтобы в них не попала вода. Нельзя употреблять моющие средства и погружать весы в воду.
- Следует избегать вибраций и сильных ударов (как, например, при падении).
- После перемещения весов необходимо их снова установить в начальное рабочее положение.
- После каждого взвешивания следует подождать.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Функциональные кнопки

	МОДЕЛЬ С ТРЕМЯ КНОПКАМИ		МОДЕЛЬ С ЧЕТЫРЬМЯ КНОПКАМИ
←	<ul style="list-style-type: none"> • Включение и выключение прибора. • Кнопка подтверждения и регистрации морфометрических параметров: рост, возраст, пол. • Вызов совокупности 3-х параметров (рост, возраст, пол), записанной в разделе памяти. 	←	<ul style="list-style-type: none"> • Включение и выключение прибора. • Кнопка подтверждения и регистрации морфометрических параметров: рост, возраст, пол. • Вызов совокупности 3-х параметров (рост, возраст, пол), записанной в разделе памяти.
		RESET	<ul style="list-style-type: none"> • Удаляет содержимое раздела памяти в режиме быстрого вызова данных из памяти.
▼/▲	<ul style="list-style-type: none"> • Изменяет значения роста и возраста, переключает значение пола (Муж/Жен). • Выбирает раздел памяти в режиме обращения к памяти и в режиме быстрого вызова данных из памяти. • Удаляет содержимое раздела памяти в режиме быстрого вызова данных из памяти. 	▼/▲	<ul style="list-style-type: none"> • Изменяет значения роста и возраста, переключает значение пола (Муж/Жен). • Выбирает раздел памяти в режиме обращения к памяти и в режиме быстрого вызова данных из памяти.

Сообщения на экране

	Рост	% Tile	Процентиль индекса массы тела (для детей и подростков)
	Вес	<	Худоба / Дефицит веса
2 -18	Возраст ребенка или подростка	~	Нормальный вес
19-99	Возраст взрослого человека	>	Избыточный вес / Риск избыточного веса
BMI	Индекс массы тела (для взрослых)	>>	Ожирение / Избыточный вес



“BODY CONTROL FAMILIAL”

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Приведение в начальное рабочее положение

- Вставьте батарейку (батарейки) в отсек для батареек, расположенный на нижней стороне весов, и/или вытащите выступающую из отсека пластиковую прокладку при первом использовании батарейки (батареек). Если весы не используются в течение длительного времени, то батарейки следует вынуть из отсека.
- Весы должны быть установлены в начальное рабочее положение при первом использовании, а затем всякий раз после того, как заменяются батарейки. Поставьте весы на твердую и ровную поверхность. Сделайте короткое, но сильное нажатие ногой на центр платформы. На экране появляется строка OOOO или ---, затем весы автоматически выключаются. После этого весы готовы к работе.

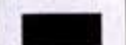
Примечание: рекомендуется производить взвешивание ежедневно в одно и то же время, например, от 6.00 до 7.00 утра.

Работа

См. иллюстрации в начале руководства.

- A: Обычное взвешивание
- B: Измерение и характеристика индекса массы тела для взрослых (B.1), для детей и подростков (B.2)
- C: Память: запись параметров в память (C.1), вызов из памяти (C.2), быстрый вызов (C.3)
- D: Отслеживание разницы между двумя взвешиваниями для взрослых (D.1), для детей и подростков (D.2)

Специальные сообщения

Err0	Ошибка инициализации. Необходимо снова привести весы в начальное рабочее положение.
Err1	Неустойчивое положение при взвешивании. Повторить взвешивание.
Err2	Перегрузка. Немедленно освободите платформу весов.
Lo	Замените батарейку.
	Переполнение памяти. Для очистки памяти используйте кнопки (▼/▲) или RESET.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанные батарейки следует выбрасывать в контейнеры, специально установленные для их сбора и отправки на переработку. Не применяйте одновременно батарейки разных типов. Не применяйте одновременно новые и использованные батарейки.



По истечении срока эксплуатации, прибор следует сдать в пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, для дальнейшей переработки.

ГАРАНТИЯ

На данный прибор предоставляется гарантия в отношении любых дефектов изготовления и исходных материалов. В течение этого периода, устранение таких неисправностей и дефектов производится бесплатно (для гарантийного ремонта необходимо предъявить документ, подтверждающий покупку). Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несчастными случаями, неправильным использованием или небрежным обращением. Со всеми претензиями следует сначала обращаться в магазин, где была совершена покупка.